

鈦玩美音波

TIGHTAN II

wontech



Wontech x Brilliance

玩美緊膚拉提

OligioX 超玩美電波

- 單極電波技術
- 膠原新生
- 緊緻提拉



Tightan II 鈦玩美音波

- 點陣 + 線性雙模式
- 深層拉提
- 輪廓雕塑



皮秒系列

PICOCARE 蒨光皮秒 基礎入門型



PICOALEX 極光皮秒 755nm、色素專精型



PICO MAJESTY 皇家皮秒 250ps、高階全能型



基礎雷射系列

Sandro Dual 珊卓除毛雷射

- 雙波長雷射
- 高效除毛
- 安全舒適



Lavieen 1927飛梭雷射

- 1927nm 波長
- 痘疤修復
- 膚質改善



為什麼選擇 **TIGHTAN II 鈦玩美音波**？

	 TIGHTAN II 鈦玩美音波	UltraformerMPT 媚必提	LinearZ Z 音波	Ultraformer III 第三代海芙音波	ULTRAcel Q+ 立線音波
 治療速度	一條 0.6 秒	一條 0.6 秒	一條 0.6 秒	一條 2.4 秒	一條 1.5 秒
 探頭數量	7 種	10 種	4 種	7 種	8 種
 筆型探頭	✓	✓	✗	✗	✗
 脈衝模式	雙向	雙向	雙向	單向	單向
 點 / 線切換	介面直接切換	介面直接切換	介面直接切換	只有點陣	需要換探頭
 療程組合	21 種	20 種	NA	NA	NA
 舒適度	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★	★★★★★
 台灣上市年份	2026	2023	2024	2018	2019

 **TIGHTAN II 鈦玩美音波** 更快・更多・更全面・更舒適

鈦玩美音波

TIGHTAN II

01 升級優勢

02 HIFU 治療原理

03 TIGHTAN II 產品介紹

04 BA照分享


05 常見問題



01

升級優勢

升級版: *TIGHTAN II* 鉅玩美音波

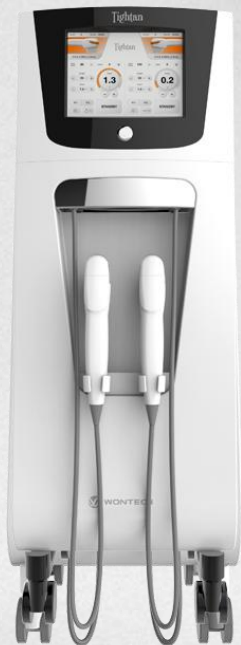

單一手握把探頭



點/線探頭更換



單向模式



4種探頭類型

兩種手握把探頭
新增 筆型睛靈探頭



點/線性合一
介面快速切換




雙向連續脈衝
業界最快音波



7種探頭深度
21種療程組合




核心技術升級
每發輸出功率一致

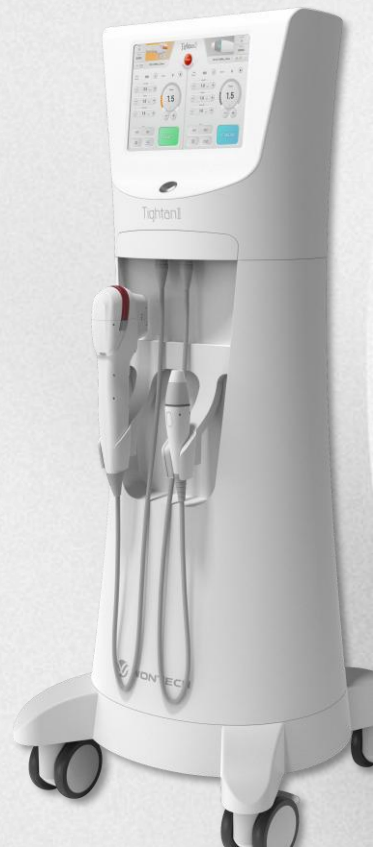



02

HIFU 治療原理

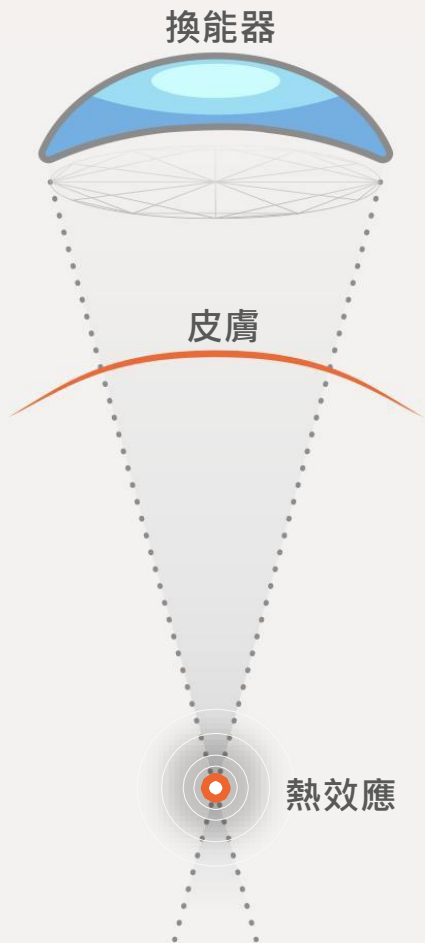

HIFU

機制


透過將高強度超聲能量聚焦於特定區域，利用 60–80°C 的焦點高溫使病灶組織變性。

特色

能量只會精準傳遞至皮膚內部的目標部位，不會對肌膚表面或周圍組織造成任何損傷。

溫度	40-60°C	60-80°C	80-100°C
組織互動	整體加熱	凝固變性	蒸發消融

HIFU 治療原理

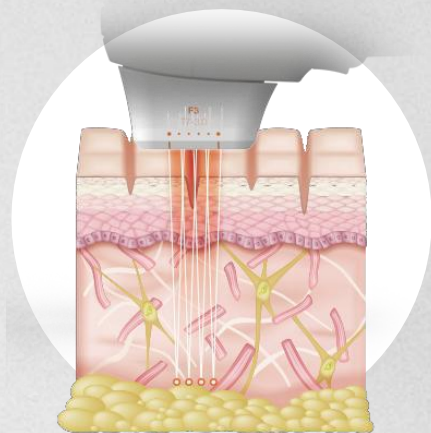


點陣式高能聚焦

完全不傷皮膚表面
直達特定皮膚層
聚焦刺激，效果加倍



立即拉提&緊緻

在目標深度（如 SMAS 筋膜層）精準形成熱凝固點
施打後皮膚組織立即產生收縮反應
首次療程結束，即可肉眼可見顯著的拉提與緊實效果

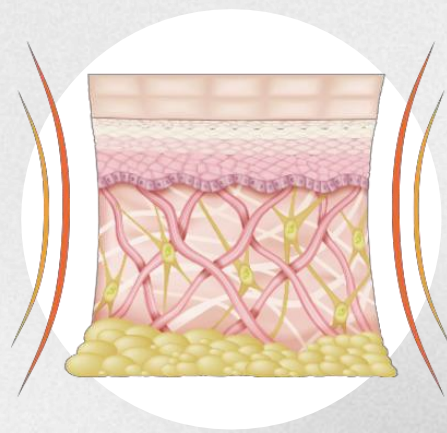


持久回春效果

膠原蛋白與彈性蛋白的再生
可延長拉提與緊緻效果

03

TIGHTAN II

產品介紹

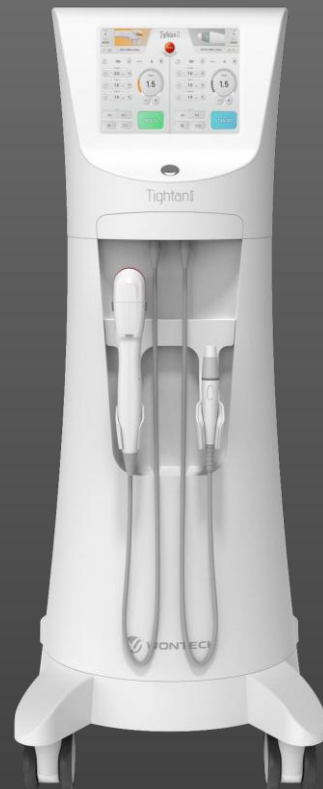

產品優勢

TIGHTAN II 鈦玩美音波



全層治療
全臉 + 身體

1.5-9.0mm 淺至深層拉提

— 21種多元療程組合

— 1機滿足多部位需求

— 提高療程客單



業界最快
全臉5分鐘

雙向連續脈衝技術

— 比傳統音波快 3 倍速度

— 午休美容 500條 5分鐘完成

— 探頭點線合一 不須更換探頭



極舒適
低疼痛感

超低疼痛指數2.2分 (10)

— 與美國機相比，痛感減少60%

— 初客接受度高並回購意願高

— 更容易推廣高單價療程



每發輸出功率一致
效果高預期


能量輸出不衰減

— 熱凝結點精準，不散射周邊組織

— 能量輸出穩定，功率集中

— 臨床可預測性高，降低操作容錯

Tightan II 仿單及適應症

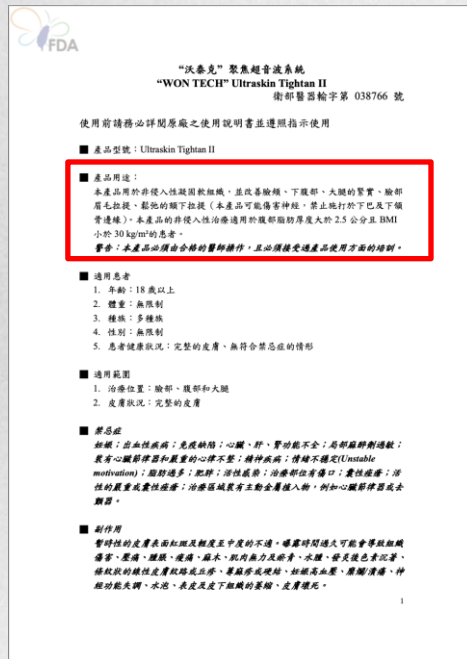


台灣衛福部核准非侵入式皮膚治療儀器

適用於：

- 改善臉頰、下腹部、大腿的緊實
- 臉部眉毛拉提
- 鬆弛的額下拉提

探頭規格

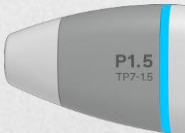探頭 Cartridge	點/線快速切換		點陣				
	F4.5	F3.0	I1.5	V6.0	S9.0	P1.5	P3.0
							
頻率	4MHz	7MHz	7MHz	2MHz	2MHz	7MHz	7MHz
深度	4.5mm	3.0mm	1.5mm	6.0mm	9.0mm	1.5mm	3.0mm
長度	5-25mm	5-25mm	5-15mm	5-25mm	5-25mm	N/A	N/A
間隔	1.2-2.0mm	1.2-2.0mm	1.2-2.0mm	1.2-2.0mm	1.2-2.0mm	N/A	N/A
功率	0.2-3.0J	0.2-3.0J	0.2-0.5J	0.2-3.0J	0.2-3.0J	0.2-0.5J	0.2-10J
治療區域	臉頰 雙下巴	全臉、雙下巴 脖子	眉眼拉提	雙下巴、上手臂 腹部緊實	腹部 大腿緊實	額頭 眉眼拉提	全臉膚質 臉+身體精雕

皮膚組織各區差異

ORIGINAL COMMUNICATION Clinical Anatomy 32:1008–1018 (2019)

Regional Thickness of Facial Skin and Superficial Fat: Application to the Minimally Invasive Procedures

YOU-SOO KIM,^{1,2} KANG-WOO LEE,³ JI-SOO KIM,^{2,4} YOUNG-CHUN GIL,⁵
TANSATIT TANVAA,⁶ DONG HOON SHIN,^{1*} AND HEE-JIN KIM^{2,7*}

¹Department of Anatomy, Institute of Forensic Science, Seoul National University College of Medicine, Seoul, South Korea

²YSBio Co. Ltd., Seoul, South Korea

³Division in Anatomy and Developmental Biology, Department of Oral Biology, Human Identification Research Center, BK21 PLUS Project, Yonsei University College of Dentistry, Seoul, South Korea

⁴Dr. Youth Clinic, Seoul, South Korea

⁵Department of Anatomy, Chungbuk National University School of Medicine, Cheongju, South Korea

⁶Chula Soft Cadaver Surgical Training Center and Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

⁷Department of Materials Science & Engineering, College of Engineering, Yonsei University Seoul, Seoul, South Korea

TABLE 3. Overall Thicknesses of the Facial Skin and Superficial Fat Based on the Anatomical Regions


Regions	Skin		Superficial fat	
	Mean	SD	Mean	SD
Forehead	1.70	0.71	1.99	1.21
Radix and dorsum	1.51	0.55	1.61	1.07
Supraorbital	1.67	0.83	1.82	1.22
Infraorbital	1.97	0.84	4.93	2.98
Perioral	1.82	0.83	5.14	3.31
Temple	1.65	0.91	2.58	1.68
Cheek	1.85	1.03	4.54	2.71

同一個臉，不同區域的組織深度差很多

✓ 皮膚厚度各區差異不大 (約 1.5–2.0 mm)
不管前額、臉頰或是眼周

✓ 表淺脂肪厚度差異非常大 (1.6–5.1 mm)

眼眶下 (Infraorbital) 和口周 (Perioral) 的脂肪層最厚，達 4.9–5.1 mm
鼻樑 (Radix) 只有 1.6 mm

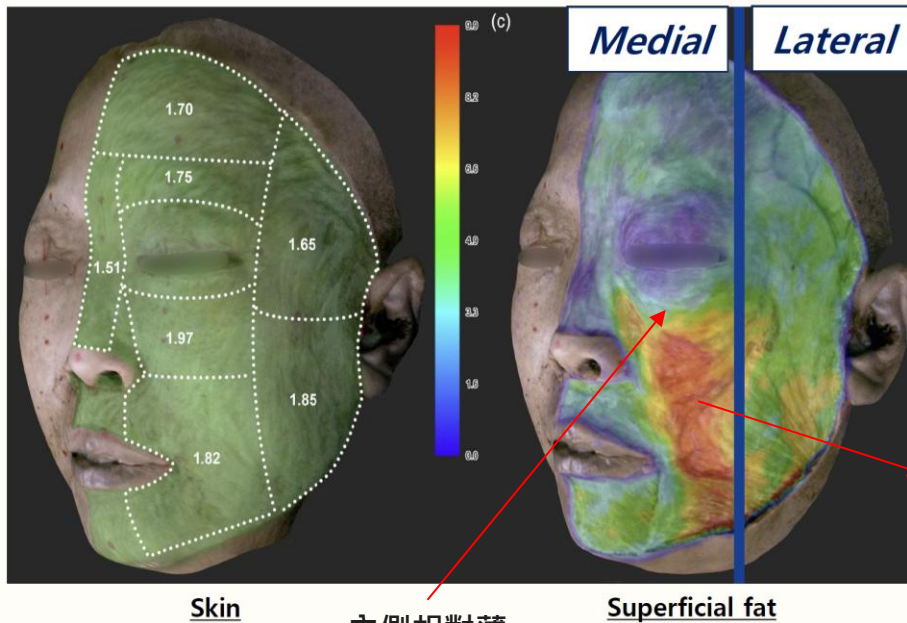

內側相對薄

臉頰外側
脂肪最厚

全層治療 全臉 + 身體

臉 部

全臉膚質改善

3.0mm



1.5mm



1.5mm



3.0mm



4.5mm



3.0mm



額頭

眉眼

臉頰

脖子

身 體

上手臂

6.0mm



腹部

6.0mm



9.0mm



3.0mm



大腿

9.0mm



膝蓋

3.0mm



NEW

筆型睛靈探頭

P1.5




P3.0



- / 針對全臉或身體小範圍區域使用
- / 圓弧形微接觸設計，大幅提升操作視野
- / 針對狹窄與弧度部位進行精細治療
- / 高達 10Hz 的極速擊發速度，縮短療程時間

橢圓設計

最小化接觸區域

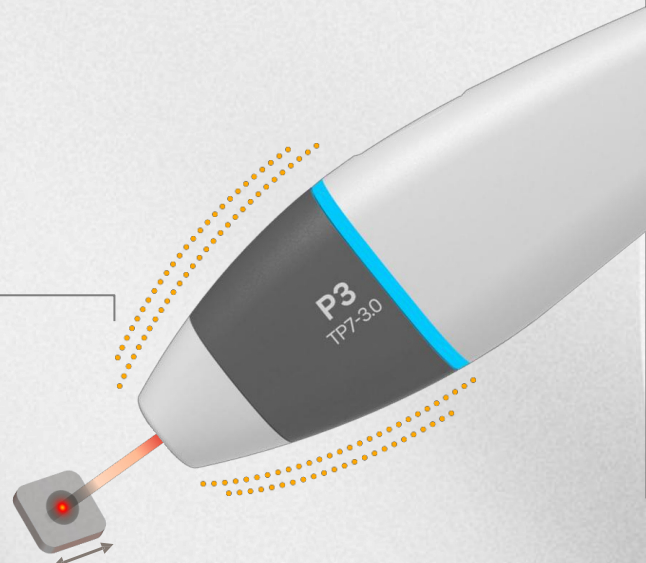


點 x 線 雙效治療策略

想要臉頰澎彈者

瘦



點陣模式
較少

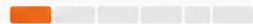

線性模式
較多



維持支撐



膠原新生



自然緊緻

想要收緊脂肪 需要拉提者

肉



點陣模式
較多



線性模式
較少



收緊脂肪



緊實拉提



改善下垂



線性模式

58°C



大範圍加熱
治療快速



舒適度高



膠原蛋白新生
膚質緊緻



點陣模式

65°C



高聚焦能量



收緊脂肪
緊實拉提




深層結構
強化支撐



依臉型需求調整 點陣 與 線性 能量分配，達到最佳治療效果



點陣模式

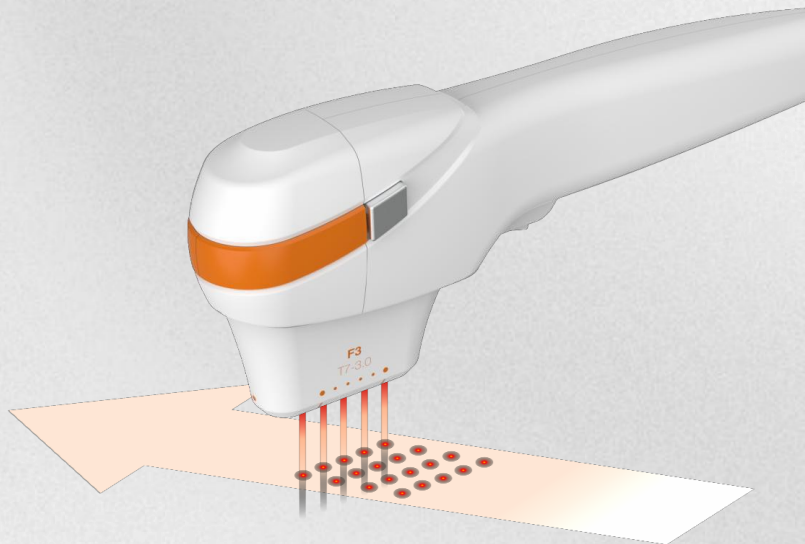

點陣模式

點陣模式精細治療
強效提拉與緊緻效果

/ 聚焦熱凝邊界清晰一致，強效拉提與緊緻

/ 直達 SMAS 筋膜層與真皮層

/ 適用於木偶紋、下顎線、臉頰、細紋、腹部、大腿、上手臂

/ 打造精準臉部輪廓線的絕佳選擇

雙重模式

單一模式

按下一次按鈕可單一擊發


自動模式

持續按著按鈕可自動擊發

治療效率提升 **500%**！

大幅降低操作者疲勞！

線性模式

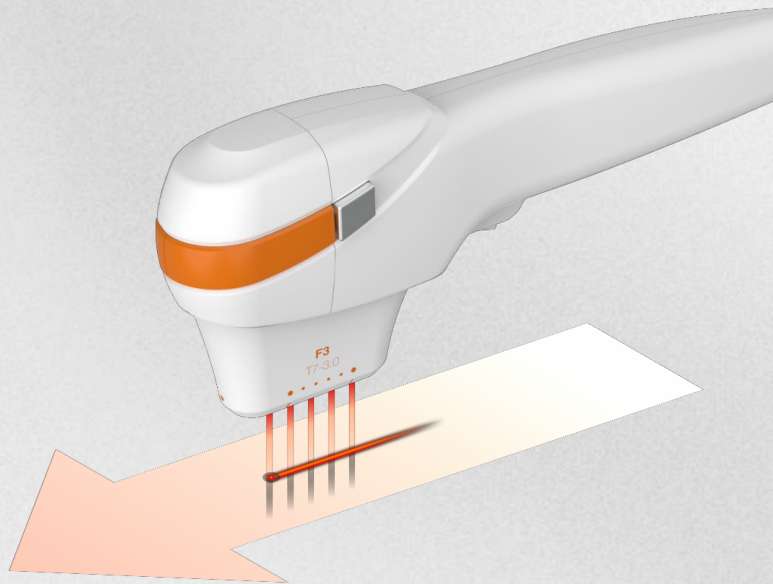

線性模式

使用線性模式進行精確且徹底的治療
更快速的過程且疼痛更少

/ 有效針對真皮層的膠原新生

/ 有效作用於臉頰、雙下巴、法令紋

/ 痛感更低，療程時間更快速

/ 打造下半臉輪廓線的理想選擇

雙重模式

單一模式

按下一次按鈕可單一擊發

自動模式


持續按著按鈕可自動擊發

治療效率提升 **500%**！

大幅降低操作者疲勞！

NEW

雙向連續脈衝技術

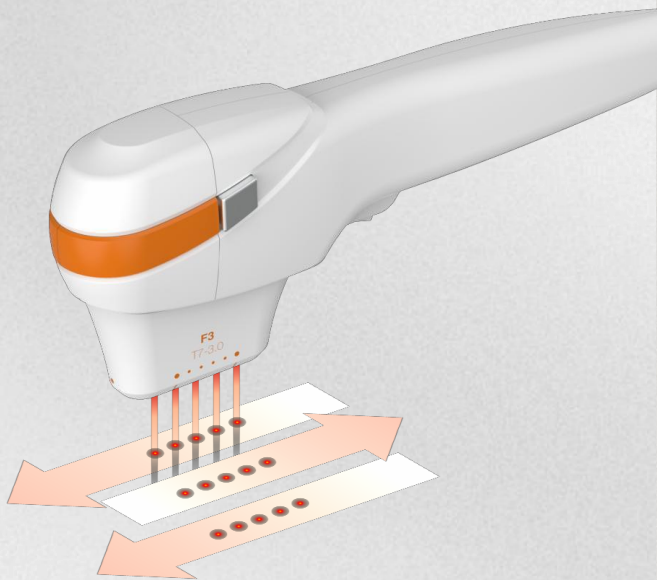

雙向連續模式

按住按鈕時進行來回雙向發射

密度加倍

覆蓋零空隙

雙向連續擊發 更快、更精準


5分鐘

500條

* Length 25mm / Space 1.5

與其他設備相比，治療速度更快

治療時間短，約5分鐘500條
減輕患者與醫生治療時間的負擔

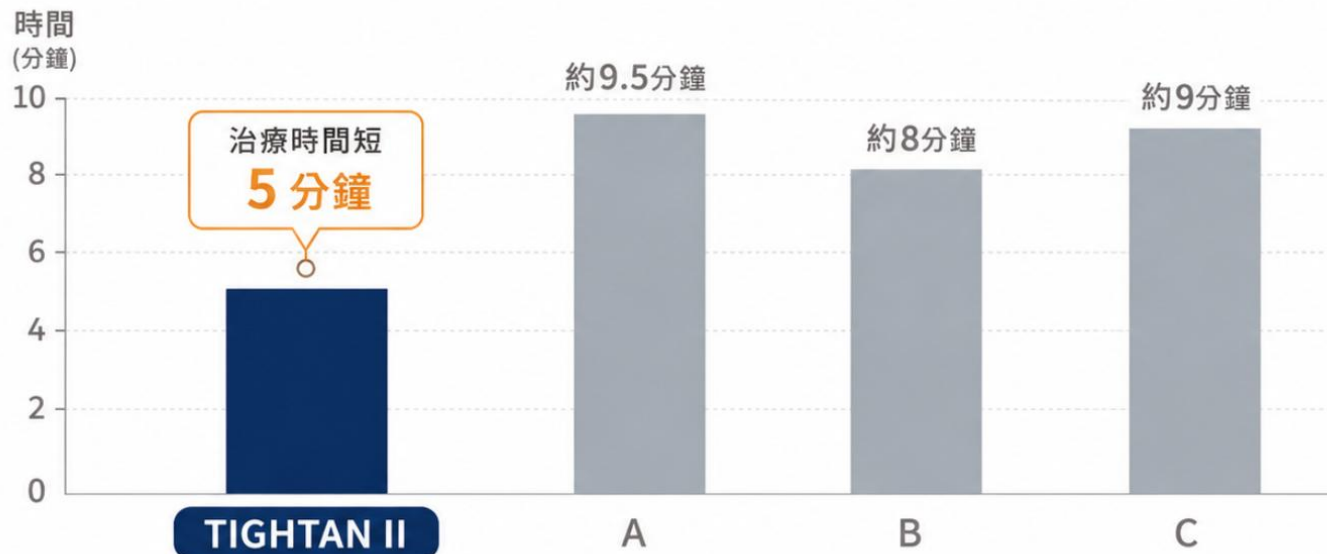

縮短治療時間
有助提升門診效率
增加患者舒適度與滿意度
優化醫療資源運用




更快的治療速度，帶來更好的臨床體驗與營運效益


市場最快 每條只需 0.6 秒

1 Shot speed by each mode

2.5 X faster shot - Less pain

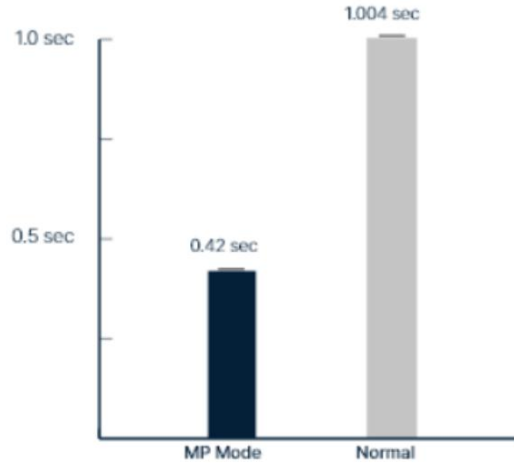

** Energy setting/1 shot - 8.33J

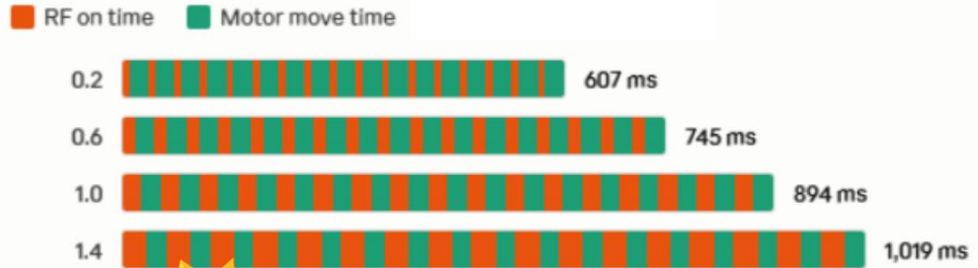

Tightan / 1 shot = 607ms

Ultraformer mpt / 1 shot = 1004ms

穩定 & 安全


Tightan II 在所有測試中展現卓越穩定性與安全性



穩定性：不受溫度上升影響
即使溫度提升，功率表現依然穩定



安全性：超越人體耐受上限
未達人體可承受的 43°C 安全上限

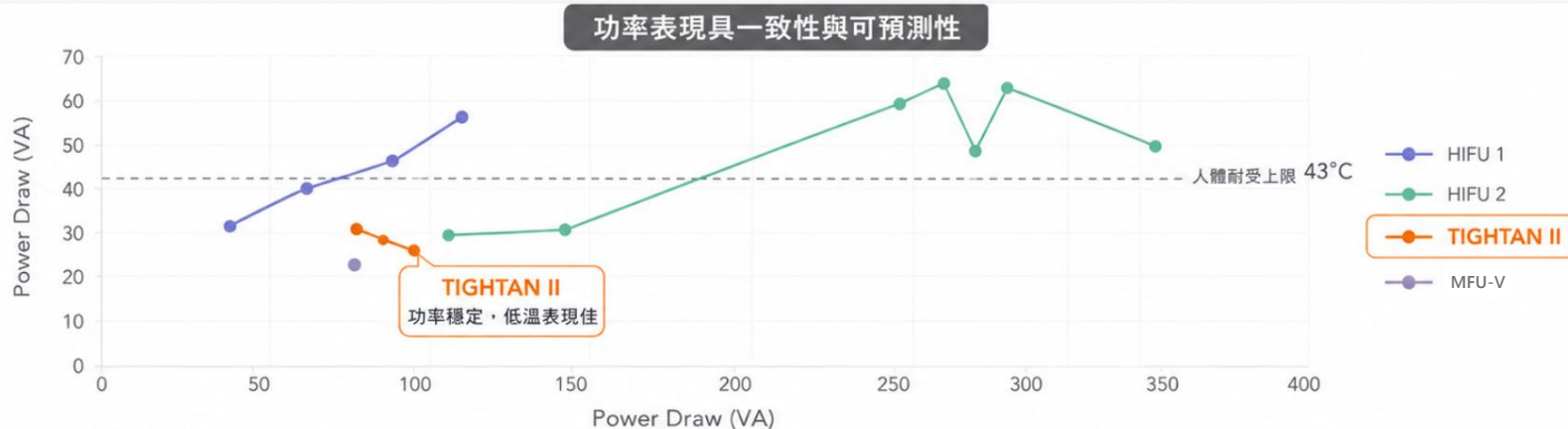

穩定性卓越

TIGHTAN II 在不同功率輸出下，
維持一致且穩定的能量表現



安全性更高

所有測試點皆低於人體耐受上限 43°C，
提供更高治療安全保障



臨床信心


可預測的能量輸出，有助於提升
治療效果與醫師操作信心

Reference 2. Tatjana Pavicic, John R. Ballard, Tatiana Bykovskaya, Niamh Corduff, Cyro Hirano, Je-Young Park, Alena Saromytskaya, Julia Sevi, Suyan Vasconcelos. (2021). Microfocused ultrasound with visualization: Consensus on safety and review of energy-based devices. J Cosmet Dermatol. 2022;21:636-647.

熱凝結點形態比較

HIFU-1

Doublo-Gold

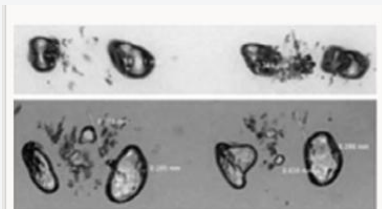


碎裂多點狀

邊界不規則、多重反射碎片

原文評為四款中均勻度變異性最大

HIFU-2

Ultraformer III

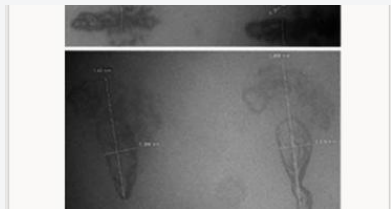


拉長水滴狀

邊界尚規則，病灶較細長、部分連接

均勻度居中，介於HIFU-1與MFU-V/HIFU-3之間

HIFU-3

Tightan II

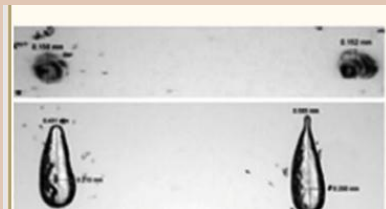


尖細水滴狀

邊界清晰規則

均勻度與MFU-V「相當」
(equivalent in consistency)

MFU-V

Ultherapy

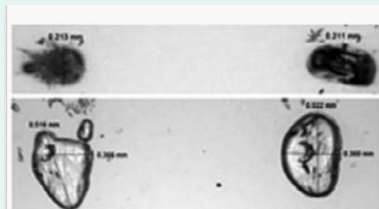

橢圓形

邊界清晰規則

原文：整體均勻度為四款中最一致的基準

結論：MFU-V之病灶均勻度優於HIFU-1與HIFU-2，而與HIFU-3 (Tightan II) 均勻度相當 (equivalent in consistency) 。

人體工學 探頭設計




- / 針對不同治療部位提供專屬探頭
- / 圓弧形微接觸手把，大幅提升操作視野
- / 配備發數範圍指示燈，實現精準定位

橢圓設計提高可視範圍

最小化接觸區域

擊發傳送範圍指示器

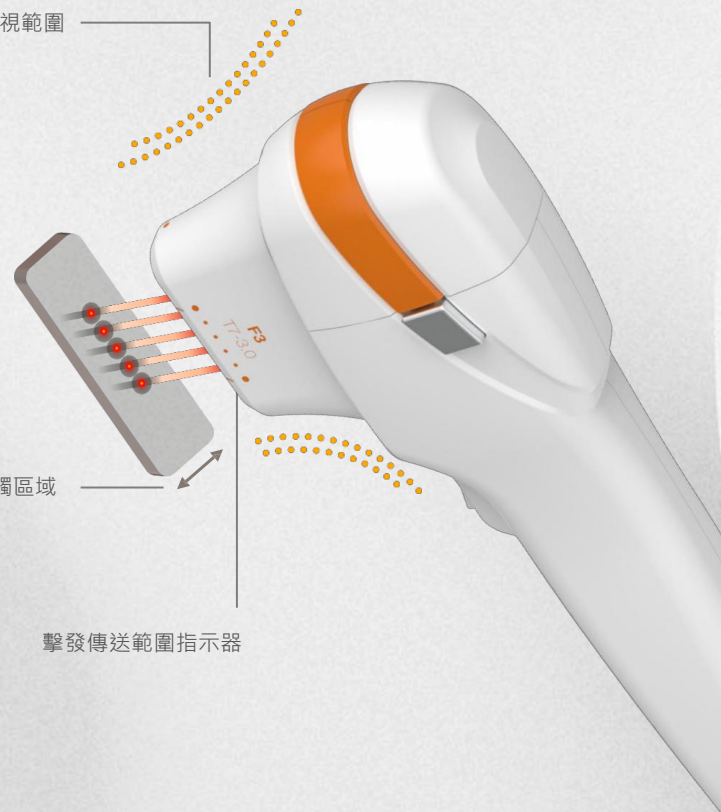

臨床高效益



對診所/醫師

- 高患者滿意度
- 整體療程時間快速
- 雙向連續脈衝模式 治療密度高
- 7 種多樣化的探頭選擇
- 橢圓的手把設計提升可視性
- 21 種療程組合搭配



對患者

- 沒有修復期
- 安全的治療
- 低痛感
- 高效能 可預期一致性結果
- 治療效果可持續長達一年

高強度聚焦超音波設備對臉部緊緻拉提的效果比較: Evaluator-blinded, split-face study



- Ulthera 的**平均痛感評分**為 5.4
- TIGHTAN II 的**平均痛感評分**為 2.2

💡 疼痛感降低 60% , 客人接受度高 💡

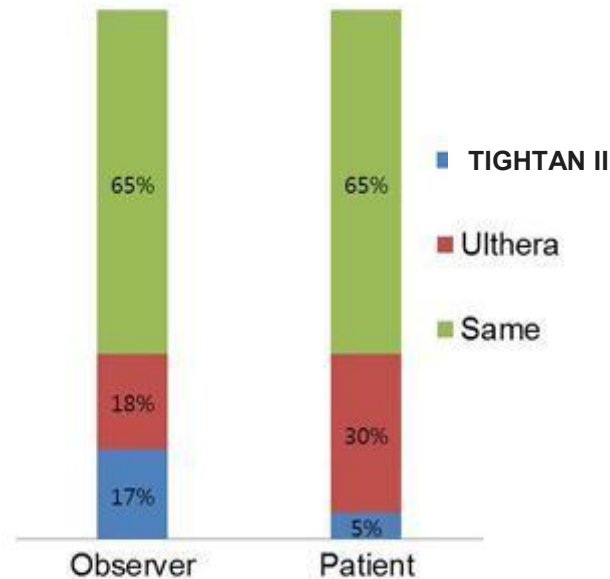



Figure 3. Preference of clinical efficacy between Ulthera and Ultra-Skin.

以卓越的結果最大限度提高患者滿意度

以最低痛感提供最卓越的療效，
從而提高患者滿意度



術前

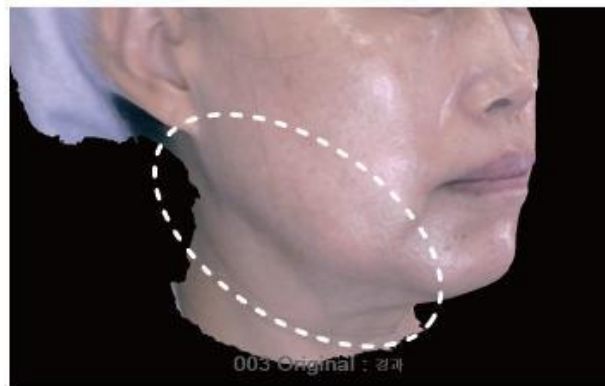

術後

儀器規格

類型	高強度聚焦超音波
探頭 Cartridge	點陣 4MHz,4.5mm / 7MHz, 1.5mm,3.0mm / 2MHz, 6.0mm,9.0mm
	線性 4MHz,4.5mm / 7MHz, 3.0mm
	筆形 7MHz, 1.5mm,3.0mm
功率	● F4.5 ● F3.0 ● V6.0 ● S9.0 :0.2~3.0J ● I1.5:0.2~0.5J
長度	● F4.5 ● F3.0 ● V6.0 ● S9.0 :5~25mm ● I1.5 :5~15mm
間距	1.2~2.0mm(0.1mm)
使用者介面	Touch-Typed LCD (10.4 inch)
電力需求	AC 100~240V,50/60Hz, 300VA
尺寸	400mm(W) X 398.3mm(D) X 1146.8mm(H)
重量	37 Kg



禁忌症

若患者出現以下情況，請勿繼續治療

1. 懷孕或哺乳婦女。
2. 臉部開放性傷口或病灶。
3. 臉部有嚴重的囊腫性痤瘡。
4. 在治療部位有電流式植入物(如節律器或去振顫器)或金屬植入物。
5. 曾患有皮膚癌其他類型癌症或癌前病變心臟疾病心臟衰竭者。

注意事項

以下情況需要醫師判斷

1. 甲狀腺功能障礙患者。
2. 心臟病患者。
3. 有蟹足腫病史的患者。
4. 皰疹病患者。
5. 患有自體免疫疾病的患者。
6. 糖尿病或癲癇患者。
7. 光敏障礙患者。

五大玩美套餐

套餐總條數	療程組合名稱	療程內卡匣搭配	主要適應症與改善痛點	客群定位
 300 條	基礎玩美	- 玩美細緻：300條 - 玩美下顎：300條	 全眼周細紋、眼袋邊緣、眉尖  拉提、前額或細紋微雕。	 音波初體驗者 小資抗初老族
 600 條	進階玩美	- 玩美睛亮 + 玩美細緻：150條 - 玩美澎彈（中臉）：300條 - 玩美輪廓（下臉）：150條	 眼周死角細紋、雙頰凹陷、 中臉初期下垂、下顎線模糊。	 中臉輕度鬆弛者 輕熟齡精準拉提
 900 條	極致玩美	- 玩美睛亮：250條 - 玩美澎彈 / 輪廓（中下臉）：500條 - 玩美下顎（雙下巴）：150條	 中重度全臉鬆弛、蘋果肌下墜、 法令紋 / 木偶紋深陷、 贅肉型雙下巴與下顎脂肪。	 熟齡肌、中重度下垂者 追求精緻下顎線肉肉臉
 1200 條	尊榮玩美	- 玩美睛亮：300條 - 玩美細緻：200條 - 玩美澎彈（全面）：400條 - 玩美輪廓（全面）：150條 - 玩美下顎（雙下巴）：150條	 重度全臉老態、全臉深刻皺紋、 雙下巴連帶頸部鬆弛、 全面性面部厚重脂肪流失。	 高預算貴婦客群 重度老化與頸部鬆弛者
 500 條起 (局部計算)	身體玩美	玩美曲線：500條以上 (依大腿/腹部/手臂面積計算)	 蝴蝶袖手臂、產後腹部鬆弛、 大腿內側贅肉、脂肪囤積與 局部肌膚鬆弛。	 產後媽媽、減重後鬆弛者 局部脂肪囤積肥胖族

建議售價

\$15,000~18,000

\$30,000~36,000

\$43,000~45,000

\$60,000~80,000



04

BA照分享



TightanII



術前

術後立即

TightanII

禁止拍照留存



術前

術後立即

TightanII

禁止拍照留存



術前

術後立即

TightanII

禁止拍照留存



術前

術後立即

TightanII

禁止拍照留存



術前

術後立即



05

常見問題



療程的痛感？

這取決於患者和治療部位。大多數人感覺到輕微的熱或輕微的癢。脂肪較多的部位通常疼痛感較低，而像額頭這類骨骼突出部位的痛感可能較明顯。



什麼時候可以看到治療效果？

療程後您可以立即感覺到皮膚緊緻。在 2-3 週內皮膚會逐漸收緊，在 2 個月左右會達到最佳效果。



注意事項是什麼？

術後基本上沒有恢復期，治療當天即可正常洗臉、化妝，完全不影響日常社交生活。

需加強防曬及保濕修護。

術後一週避免三溫暖、飲酒和吸煙等行為。



治療需要多久時間？

500 發只需要 5 分鐘。

全臉治療所需時間約 15 分鐘。



治療效果持續多久？

膠原蛋白和彈性蛋白新生帶來的拉提效果可持續長達 1 年。建議在 1 個月後進行後續療程，以獲得更持久的效果。



多久接受一次治療？

如果你想最大化效果，建議在一個月後進行一次後續治療，以獲得更持久的效果。